

**MEDRAD<sup>®</sup>**


**Sistema de  
Inyección de  
Contraste Facil  
de usar, Seguro,  
Confiable!**



**MEDRAD  
VISTRON CT<sup>®</sup>**

*Sistema de Inyección de Contraste*

Para obtener **EXCELENTE** d

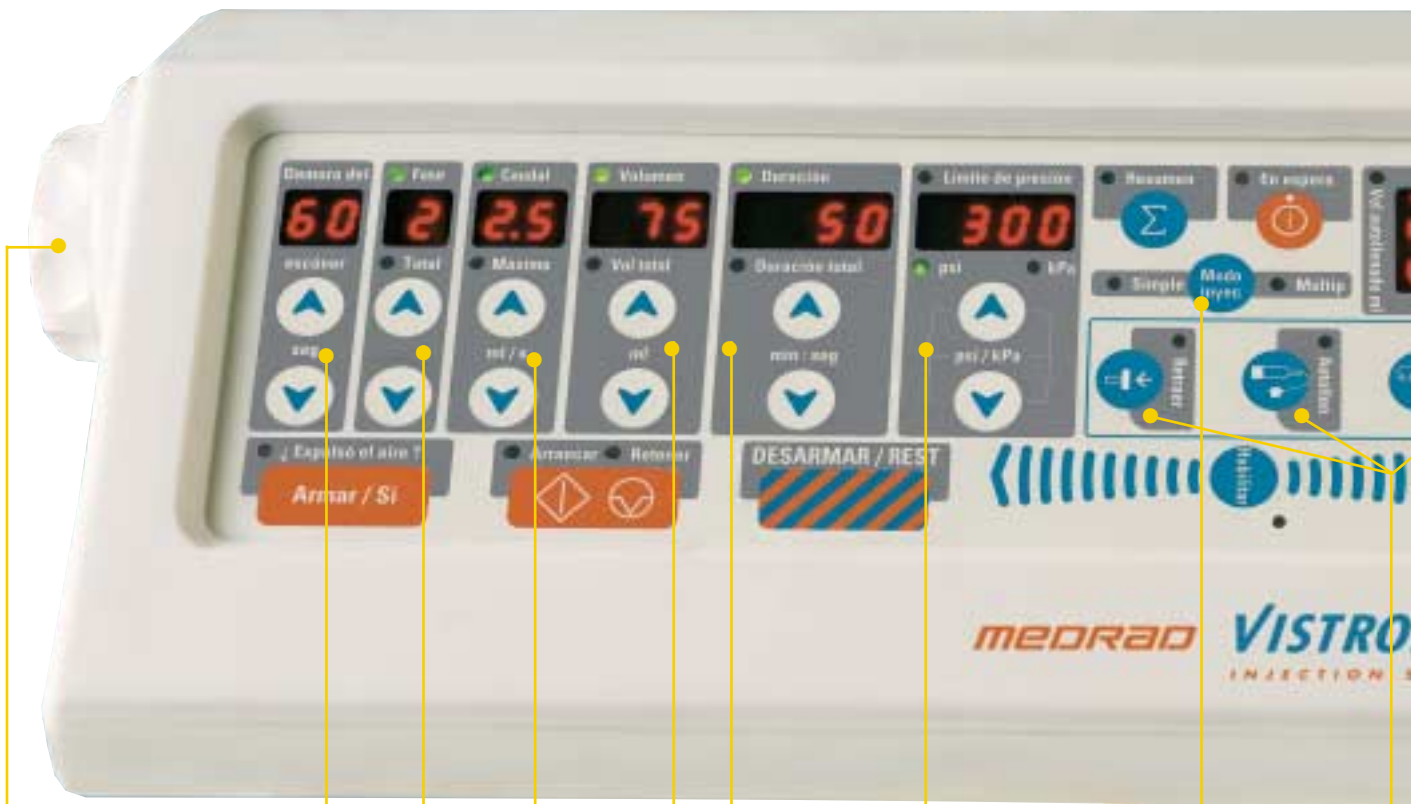

Botón Manual

Retraso del Scan

Tasa de Flujo

Tiempo de la inyección

Límite de presión programado

Módulo de inyección simple o múltiple

1-4 Fases

Volumen Programado

Función de la selección de llenado, auto llenado y retroceso

*Facil de usar*

### Cabeza Compacta con control programable:

- Programe e inicie la inyección al lado del paciente, mas conveniente y seguro
- Jeringas desechables transparentes *Qwik-Fit* para la seguridad del paciente y del usuario
- Función de autollenado economía de tiempo y esfuerzo
- LED's grandes proporcionan fácil visualización del status de la inyección
- Una a cuatro fases de inyección, para obtener la variación necesaria de la inyección
- Limite de presión programable, mayor seguridad
- Selección del tamaño de la jeringa: 125 o 200 ml – automáticamente intercambiables
- Monitor compacto remoto, proporciona status continuo.
- Programación Flexible
  - Seleccione la tasa de flujo y volumen, el inyector calculará el tiempo de duración de la inyección
  - Seleccione la duración y el volumen, el inyector calculará la tasa de flujo
- Boton Manual conveniente para prueba de inyección de pequeño volumen
- Configuración para elección del idioma

# Diagnostico imágenes



Jeringa/Volumen de auto llenado

Jeringa desechable Qwik-Fit de 125 o 200 ml


Calentador de la Jeringa



Monitor Remoto



Consola del sistema de fuerza

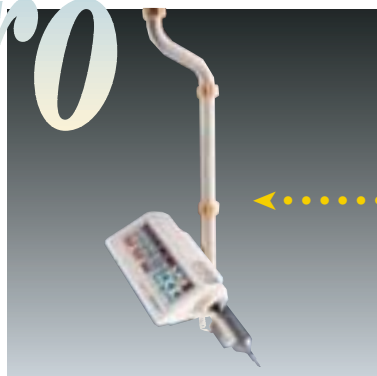

Sistema de montaje por suspensión a teto opcional



Pedestal de altura ajustable opcional



Pedestal de altura única

Confiable

Seguro

# Especificaciones del Sistema de Inyección Vistron CT de Medrad

## Control de la Cabeza del Inyector (no incluye el pedestal)

<b>Dimensiones</b>		
5 in (12.7 cm)	Altura	
14 in (34.3 cm)	Ancho	
10.25 in (26.0 cm)	Profundidad	

**Peso**  
9 lb (4.1 Kg)  
sin los cables

## Monitor Remoto

<b>Dimensiones</b>		
7.4 in (18.8 cm)	Altura	
5.2 in (13.2 cm)	Ancho	
2.1 in (5.3 cm)	Profundidad	

**Peso**  
2.2 lb (1.0 Kg)  
sin los cables

## Sistema de Fuerza De la Consola

<b>Dimensiones</b>		
4 in (10.2 cm)	Altura	
12 in (30.5 cm)	Ancho	
7 in (17.8 cm)	Profundidad	

**Peso**  
5 lb (2.3 Kg)  
sin los cables de fuerza

**Requerimientos Eléctricos**  
100-240 VAC  
50/60 Hz

**Límite de Presión**  
Programable de 50 hasta 300 PSI en incrementos de 50 PSI

**Calentador de la Jeringa**  
31 a 41°C

**Retraso del Scan**  
0 hasta 99 segundos

**Jeringas**  
125 ml o 200 ml *Qwik-Fit*

**Escala de autollenado**  
7 ml por segundo

**Tubo de Conexión**  
60 in. (1.52 m)

**Capacidad de la Inyección**  
1 hasta 4 fases

**Tasa de Flujo**  
0.1 a 9.9 ml/Seg (en incrementos de 0.1 ml/Seg)

**Volumen**  
10 ml al máximo de la capacidad de la jeringa (125 ml o 200 ml) en incrementos de 1 ml

**Duración:**  
1 segundo a 20:50 para una jeringa de 125 ml  
1 segundo a 33:20 para una jeringa de 200 ml

## AMERICAS

**Medrad, Inc. Corporate Office**  
One Medrad Drive  
Indianola, PA 15051-0780 Estados Unidos  
Telefono: (412) 767-2400 • FAX: (412) 767-4128

**Medrad America Latina Ltda**  
Av Republica Argentina • 2403 Conj. 54  
80610-260 Curitiba – PR • Brasil  
Telefono: +55 (41) 345-6885  
FAX: +55 (41) 345-0449

**Medrad Mexicana S. de R. L. de C. V.**  
Leibnitz 204 • Col. Anzures  
Miguel Hidalgo • 11590 Mexico City  
Telephone: (525)-402-6128  
FAX: (525)-254-0881

## EUROPA

**Medrad Europe B.V.**  
Postbus 3084 • 6202 NB Maastricht  
Holanda  
Telefono: +31 (0) 43-3585601  
FAX: +31 (0) 43-3650020

## ASIA/PACIFIC

**Medrad, Inc. (Asia)**  
200 Jalan Sultan #09-01 • Textile Centre  
Singapura 199018  
Telefono: +65 292-5357  
FAX: +65 292-7276

## Información para el Pedido

**Sistema Vistron CT 610** Configuración estándar con Monitor Remoto, sistema con Cabeza montada sobre pedestal Catalogo #VCT 610

**Sistema Vistron CT 600** Sistema Básico (debe adicionar cabeza y cables) use para configurar su sistema Catalogo #VCT 600

# MEDRAD®

La única fuente para obtener la ingeniería Medrad, la calidad Medrad, servicio Medrad y el apoyo Medrad.



Medrad está dedicada a mejorar continuamente la calidad de todos sus productos y servicios a fin de lograr que la satisfacción, lealtad y respeto de sus clientes sean insuperables. Nuestra política dicta comprender y acordar claramente con los requisitos válidos del trabajo que hacemos para nuestros clientes, tanto internos como externos, y esforzarnos por cumplir con dichos requisitos en un 100%...a tiempo, todo el tiempo.

**Medrad se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características descritas en el presente, o de discontinuar la fabricación del producto descrito en cualquier momento, sin previo aviso, u obligación. Por favor comuníquese con su representante autorizado de Medrad para obtener la información mas reciente.**

Medrad, Inc. esta certificado por EN-ISO 9001/EN 46001  
Medrad Europe B.V. esta certificado por EN-ISO 9002/EN 46002

Medrad, Quality for Life, Q y su diseño, Qwik-Fit Syringe y Medrad Vistron CT son marcas federalmente registradas de Medrad, Inc. U.S.A.

95403-00-BA-05 Rev. B